


HealthTiCloud RIS

Manual de usuario Instructivo por perfiles y flujo clínico

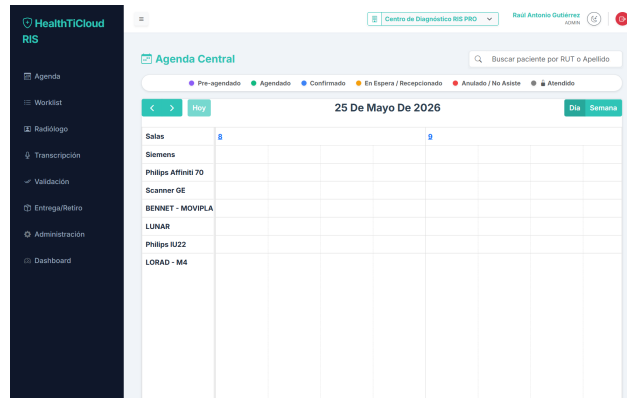


Sistema de Información Radiológica · Junio 2026

Índice

1. Introducción al sistema
2. Flujo clínico completo
3. Acceso, interfaz y menú según su perfil
4. Módulo Agenda (Recepción)
5. Tecnología: Worklist y Atención en salas
6. Módulo Radiólogo
7. Módulo Transcripción
8. Módulo Validación
9. Módulo Entrega y retiro
10. Módulo Administración
11. Módulo Dashboard y alertas
12. Anexo: centros dental y veterinarios
13. Dictado por voz, visor OHIF y bridge local
14. Perfil Secretaria
15. Sincronización con la nube
16. Preguntas frecuentes
17. Anexo técnico

HealthTiCloud RIS

Manual de usuario Instructivo por perfiles y flujo clínico

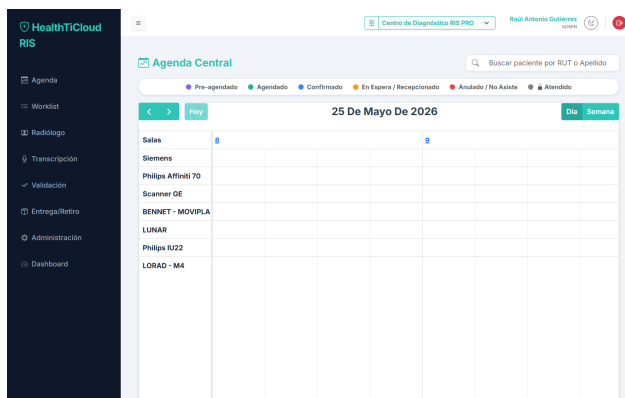

Sistema de Información Radiológica · Junio 2026

Índice

1. Introducción al sistema
2. Flujo clínico completo
3. Acceso, interfaz y menú según su perfil
4. Módulo Agenda (Recepción)
5. Tecnología: Worklist y Atención en salas
6. Módulo Radiólogo
7. Módulo Transcripción
8. Módulo Validación
9. Módulo Entrega y retiro
10. Módulo Administración
11. Módulo Dashboard y alertas
12. Anexo: centros dental y veterinarios
13. Dictado por voz, visor OHIF y bridge local
14. Perfil Secretaria
15. Sincronización con la nube
16. Preguntas frecuentes
17. Anexo técnico

1. Introducción al sistema

HealthTiCloud RIS es la aplicación web del centro para gestionar el recorrido del paciente: desde la cita en recepción hasta la entrega del informe. Cada persona del equipo accede con su usuario y ve solo los módulos que le corresponden según su rol.

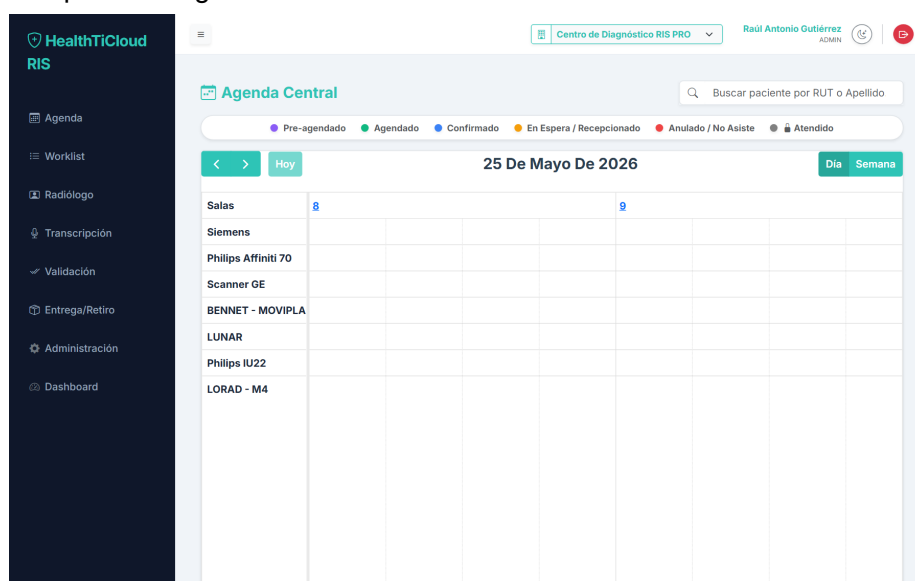


Figura 1. Vista principal del sistema (ejemplo: Agenda).

Módulos del sistema

Módulo	Para qué sirve	Perfiles que suelen usarlo
Agenda	Citación, calendario, pagos y confirmación de pacientes.	Recepción, Secretaria, Administrador
Worklist	Atención en sala con worklist DICOM (centros clínicos).	Tecnólogo, Administrador
Atención en salas	Atención técnica y subida manual de imágenes (dental / vet).	Tecnólogo, Administrador
Radiólogo	Lectura de imágenes, borrador y firma de informes.	Médico radiólogo, Administrador
Transcripción	Redacción del informe a partir del audio dictado.	Transcriptor, Administrador
Validación	Revisión y firma final del informe transcrito.	Médico radiólogo, Administrador
Entrega/Retiro	Entrega de resultados al paciente o autorizado.	Recepción, Secretaria, Administrador
Administración	Usuarios, catálogos, salas, reportes y configuración.	Administrador, Sys. Admin
Dashboard	Indicadores del día: citas, ingresos, flujo clínico.	Administrador y supervisión

2. Flujo clínico completo

Un paciente típico recorre estas etapas. Varios módulos intervienen en distintos momentos; no es necesario que un mismo usuario vea todos los pasos.

Flujo clínico — HealthTiCloud RIS



Figura 2. Diagrama del flujo clínico.

1. Recepción crea la cita en Agenda (paciente, examen, pago).

2. Rec

Estado de la cita	Quién actúa	Módulo
Agendado / Confirmado / En espera	Recepcionista	Agenda
DICOM enviado / imágenes en PACS	Tecnólogo	Worklist o Atención en salas
En informe / En transcripción	Radiólogo / Transcriptor	Radiólogo / Transcripción
Entregable	—	Entrega
Entregado	Recepcionista	Entrega

3. Acceso, interfaz y menú según su perfil



Figura 3. Pantalla de inicio de sesión.

Inicio de sesión

1. Abra la URL del sistema e ingrese el usuario y contraseña entregados por su administrador.

2. Tras

¿Por qué veo menos módulos que un compañero?

Es normal. El menú lateral se adapta automáticamente al rol asignado a su usuario. Solo aparecen los módulos que necesita para su trabajo diario.

- Recepción o Secretaria: Agenda y Entrega/Retiro (la secretaria solo edita pacientes en sede RDOX Osorno).

• Tecn

Qué hacer si falta un módulo

- Verifique que seleccionó el laboratorio correcto en la barra superior.

• Cier

Elementos comunes de la interfaz

- Menú lateral izquierdo: cambio entre módulos visibles para usted.

• Barra

Contraseña y recuperación

1. En la pantalla de login use «¿Olvidó su contraseña?» si el centro tiene correo configurado.

Módulo en menú	Roles con acceso
Agenda	recepcion, secretaria, secretario, admin, sis_admin
Worklist	tecnologo, admin, sis_admin (clínico con MWL)
Atención en salas	tecnologo, admin, sis_admin (dental / vet / sin MWL)
Radiólogo	radiologo, admin, sis_admin
Transcripción	transcriptor, admin, sis_admin
Validación	radiologo, admin, sis_admin
Entrega/Retiro	recepcion, secretaria, secretario, admin, sis_admin
Administración	admin, sis_admin
Dashboard	admin, recepcion, tecnologo, radiologo, transcriptor, sis_admin

Administrador vs Sys. Admin

Aspecto	admin (centro)	sis_admin (sistema)
Laboratorios visibles	Solo asignados (matriz + sucursales)	Todos (Visión Global o cualquier sede)
Crear matrices nuevas	No	Sí (Administración)
Crear usuarios secretaria	Sí	Sí
Datos en módulos	Filtrados a sus sedes	Todos los del sistema o sede elegida

4. Módulo Agenda (Recepción)

Acceso: recepcionistas y administradores del centro.

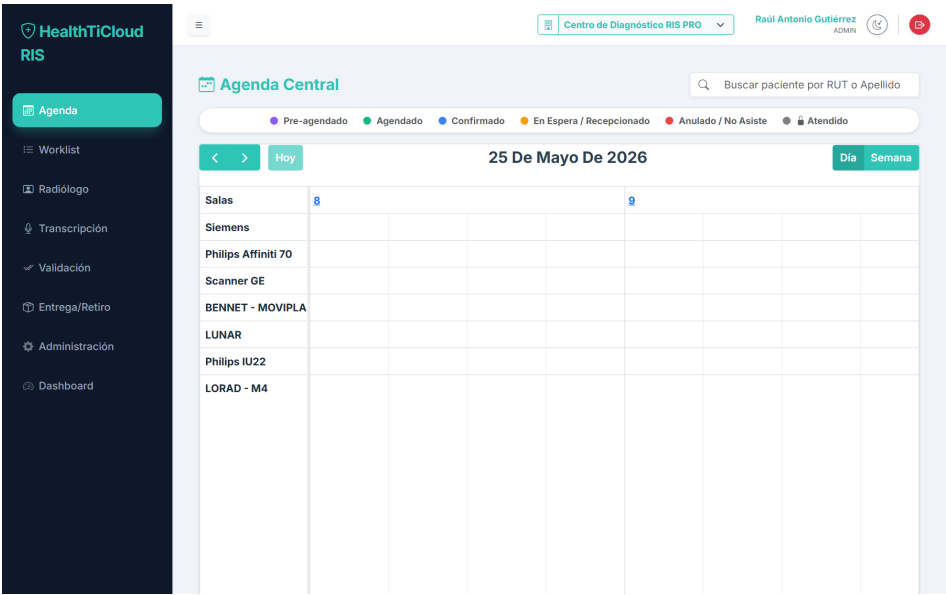


Figura 4. Calendario de agenda por sala y horario.

Qué puede hacer aquí

- Ver el calendario de citas por sala/equipo con códigos de color por estado.

• Busc

Nueva Cita Médica

1. Paciente 2. Cita 3. Exámenes 4. Pago

1. Identidad y Previsión

Tipo Documento: RUT (Chile) N° de RUT *: 12.345.678-9

Nombres *: Primer Apellido *: Segundo Apellido: Sexo: Masculino

F. Nacimiento: dd-mm-yyyy Edad: Previsión: Seleccione Previsión... Plan: Seleccione un plan

Correo Electrónico: ejemplo@correo.com Teléfono Celular: +56 9 1234 5678

Cancelar Siguiente →

Figura 5. Formulario de cita por pasos.

Wizard de nueva cita (4 pasos)

1. Paciente: RUT, nombres, contacto, previsión. Puede recuperar un paciente ya registrado.

2. Cita

Correo de instrucciones al paciente

Al guardar una cita cuya procedencia NO sea Ambulatorio, el sistema puede enviar por correo las instrucciones de preparación configuradas en Administración para cada examen. Requiere email válido del paciente y correo SMTP configurado en el servidor.

Colores del calendario

- Violeta: pre-agendado.

• Verd

5. Tecnología: Worklist y Atención en salas

Acceso: tecnólogos y administradores. El menú muestra Worklist o Atención en salas según el tipo de laboratorio activo (no ambos a la vez).

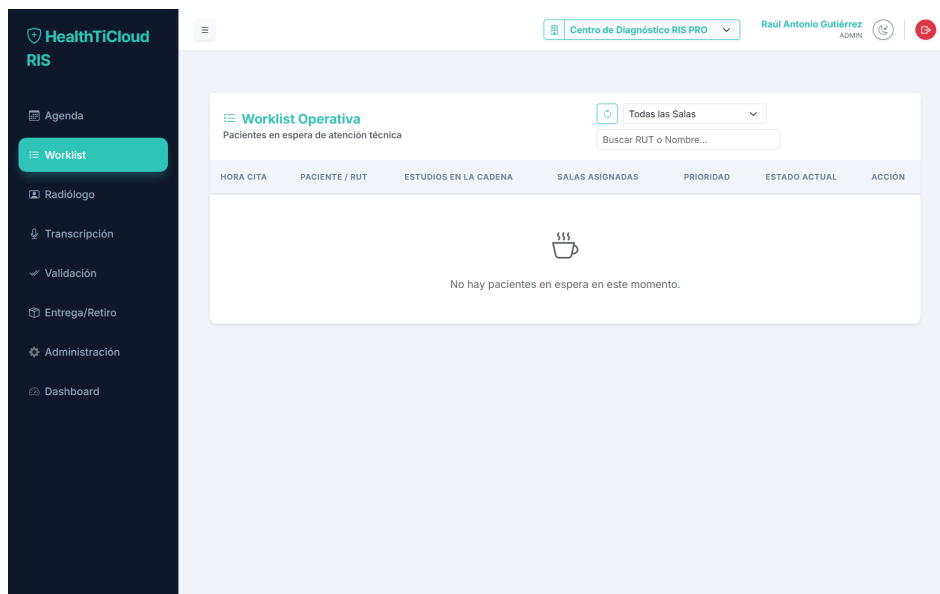


Figura 6. Lista de pacientes en espera de atención técnica (ejemplo Worklist).

Flujo común (todos los centros)

1. Recepción agenda y confirma la cita en el módulo Agenda.

2. El te

Worklist — centros clínicos con MWL

- Ver pacientes confirmados, agrupados por cadena de estudios.

• Filtra

Atención en salas — dental, veterinario o sin worklist

Para CBCT, sensores intraorales u otros equipos que exportan DICOM por archivo (sin licencia MWL o sin integración worklist), use este módulo en lugar de Worklist.

- Misma lista de pacientes confirmados desde Agenda.

• En e

Entornos de prueba tras db:seed incluyen «Dental Demo — CBCT Temuco», «Dental Demo — Sucursal Centro», «Veterinaria Demo Sur» y «Veterinaria Demo — Urgencias 24h». El usuario tecnólogo de prueba (friquelme) tiene acceso a esas sedes.

6. Módulo Radiólogo

Acceso: médicos radiólogos y administradores.

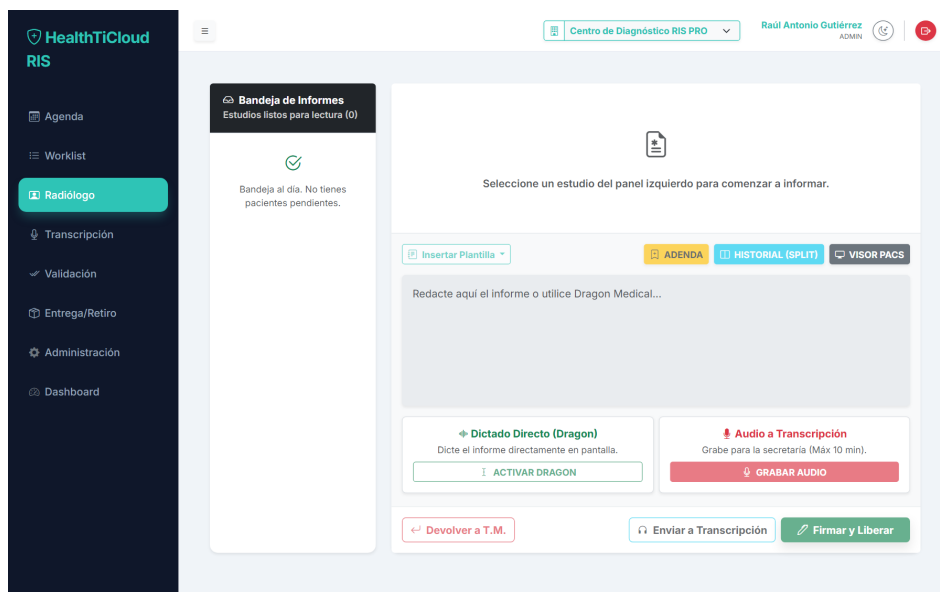


Figura 7. Estudios pendientes de informe.

Visor OHIF (imágenes)

Desde Radiólogo o Validación, el botón del visor abre el OHIF en una pestaña nueva. La URL usa el formato del visor centralizado:

- Base: <https://viewer.healthticloud.cl/viewer>

• Pará

Qué puede hacer aquí

- Ver estudios listos para lectura (cadena de atención completa en worklist).

• Abrir

7. Módulo Transcripción

Acceso: transcriptoros y administradores.

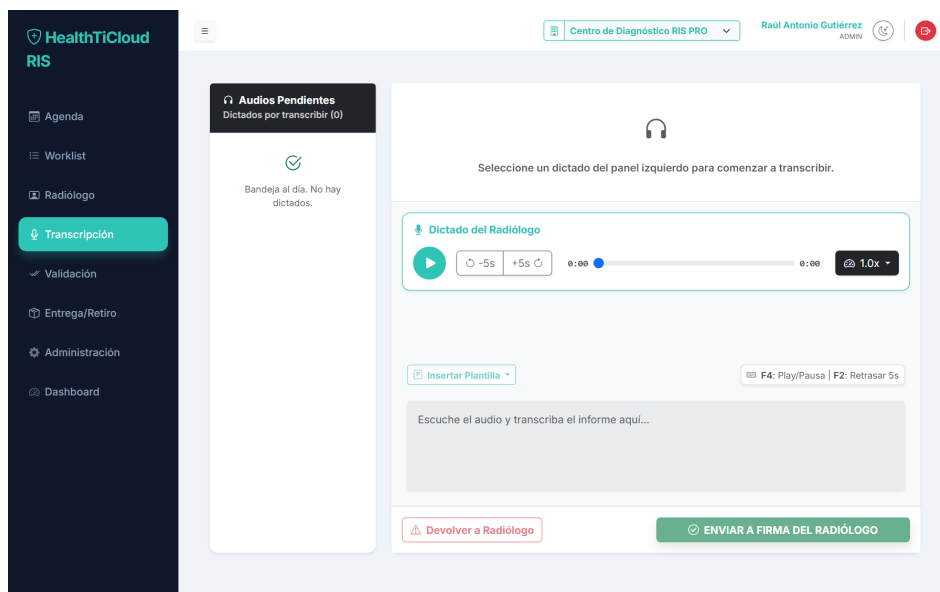


Figura 8. Cola de audios pendientes de transcribir.

Qué puede hacer aquí

- Ver estudios con audio dictado pendiente de redacción.

• Escu

8. Módulo Validación

Acceso: radiólogos (validación de informes transcritos) y administradores.

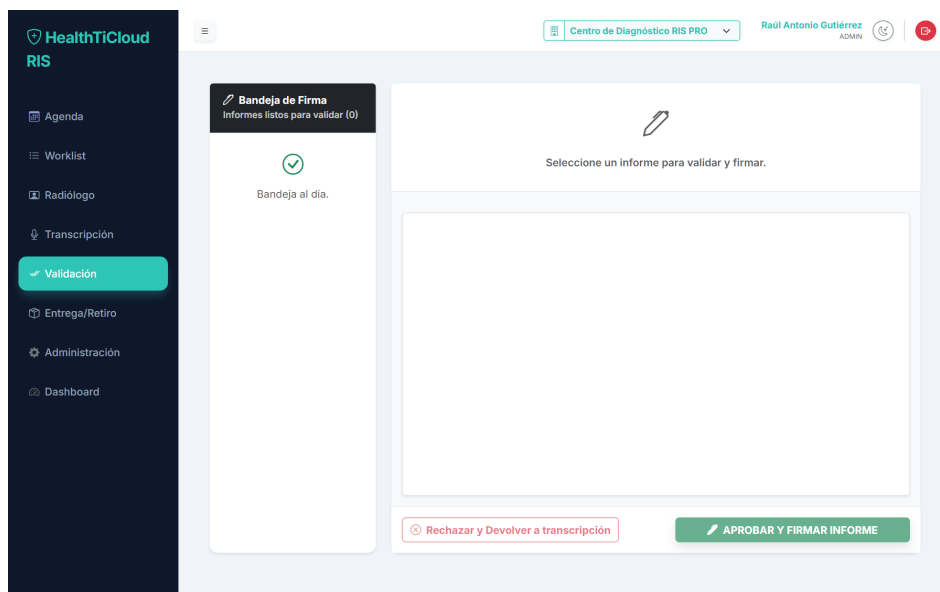


Figura 9. Informes pendientes de validación.

Qué puede hacer aquí

- Revisar informes transcritos antes de la firma definitiva.

• Com

9. Módulo Entrega y retiro

Acceso: recepcionistas y administradores.

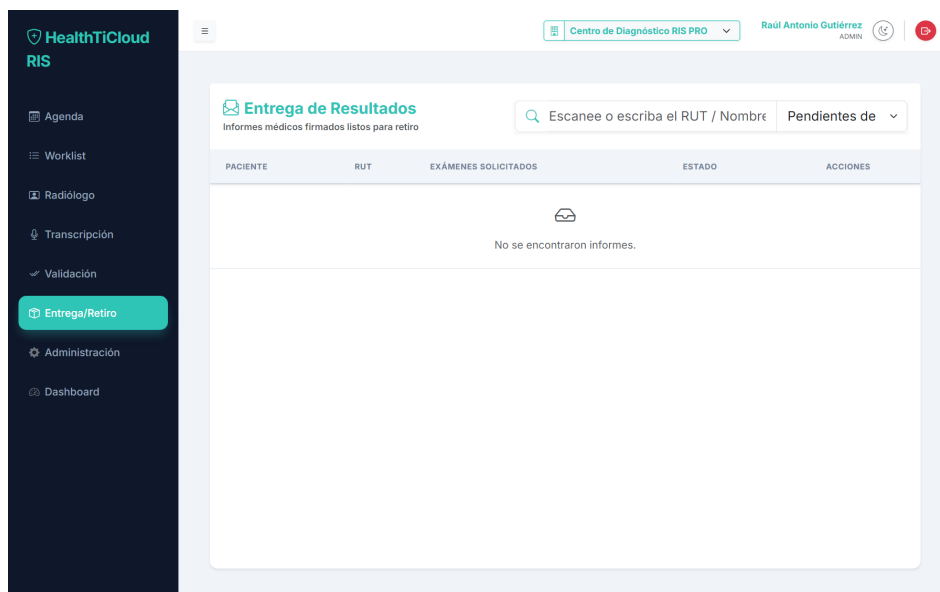


Figura 10. Resultados listos para retiro.

Qué puede hacer aquí

- Buscar pacientes con informes firmados (estado entregable).

• Filtra

10. Módulo Administración

Acceso: administradores del centro. No visible para recepción, tecnología ni radiología en su día a día.

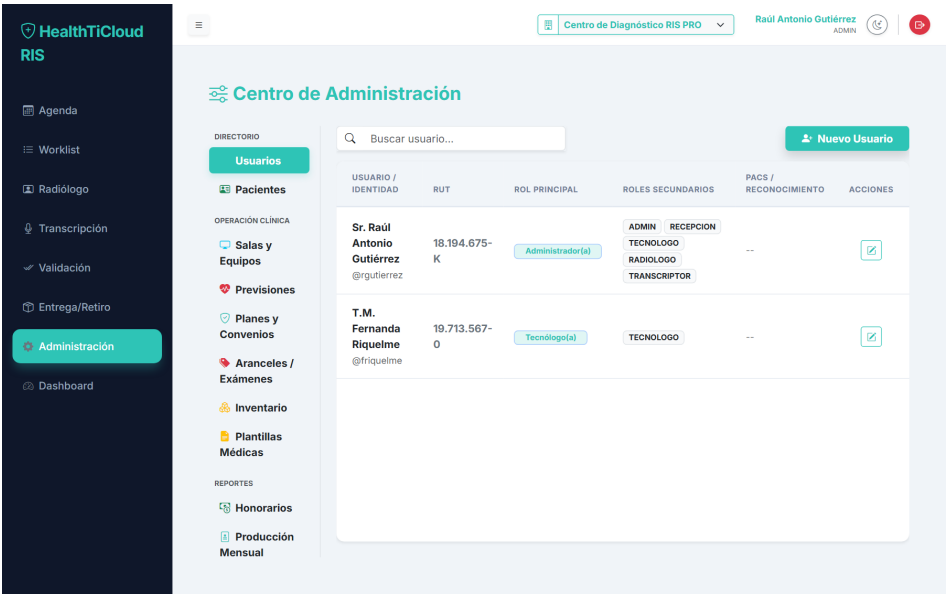


Figura 11. Panel de administración del centro.

Usuarios y rol Secretaria

1. Administración → Usuarios → Nuevo usuario.

2. Com

Qué puede hacer aquí

- Gestionar usuarios: crear, editar roles (incluye secretaria), asignar laboratorios.

• Conf

11. Módulo Dashboard y alertas

Acceso: administradores y perfiles operativos con permiso de visualización.

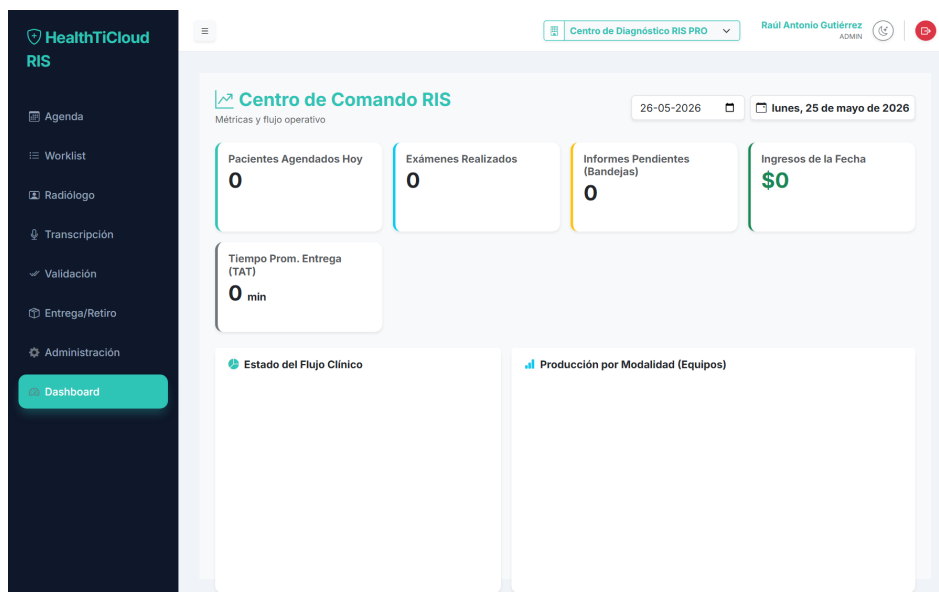


Figura 12. Indicadores operativos del día.

Qué puede hacer aquí

- Consultar KPIs del día: pacientes, exámenes realizados, ingresos estimados.

• Ver t

Alertas operativas

El panel puede resaltar citas con demora (TAT por encima del umbral configurado en el servidor), estudios en informe prolongado o colas de worklist. Revise el detalle en cada módulo (Agenda, Worklist, Radiólogo) para actuar.

12. Anexo: centros dental y veterinarios

Este manual describe el flujo clínico estándar (centro de diagnóstico por imágenes humano). Si su centro es dental o veterinario, el mismo HealthTiCloud RIS aplica, pero la interfaz y algunas opciones de facturación se adaptan automáticamente al tipo de laboratorio. No necesita otro manual: use los capítulos 1 a 11 y consulte aquí las diferencias.

Configuración inicial (administrador)

1. Ingrese a Administración con un usuario administrador.

2. Al c
Centro L

El tipo queda guardado en el registro del laboratorio. Si el tipo no coincide con la realidad del centro (por ejemplo, un dental configurado como clínico), verá pantallas de FONASA que no debería usar; corrija el tipo en Administración.

Resumen por tipo de centro

Aspecto	Clínico humano	Centro dental	Veterinario
Bonos y panel FONASA	Sí	No (oculto)	No (oculto)
Previsión en cita (FONASA/ISAPRE)	Sí	Oculto en agenda	Solo Particular / Convenios
Etiqueta del sujeto de atención	Paciente	Paciente	Mascota
Identificación	RUT / Documento	RUT / Documento	ID mascota / microchip
Código de prestación en exámenes	Cód. FONASA	Cód. prestación	Cód. prestación
Módulo de tecnología	Worklist (MWL)	Atención en salas	Atención en salas
Subida de imágenes	Equipo + worklist	Archivo .dcm/.zip manual	Archivo .dcm/.zip manual
Flujo → Informe → Entrega	Igual	Igual	Igual

Recepción y Agenda

- El calendario, wizard de cita, pagos y estados funcionan igual que en un centro clínico.

• En d
u otro m

Centro dental: puntos clave

- Ideal para radiología intraoral, panorámicas, CBCT u otros estudios odontológicos.

• Flujo

Centro veterinario: puntos clave

- El dueño o responsable se registra en los datos de contacto del paciente (mascota).

• Use

Laboratorios de demostración (desarrollo)

Nombre en selector	Tipo	Uso
Dental Demo — CBCT Temuco	Centro Dental	Matriz dental de prueba
Dental Demo — Sucursal Centro	Centro Dental	Sucursal hija dental
Veterinaria Demo Sur	Veterinario	Matriz veterinaria de prueba
Veterinaria Demo — Urgencias 24h	Veterinario	Sucursal veterinaria
Centro de Diagnóstico RIS PRO	Clínico	Flujo worklist clásico

Se crean al ejecutar `php artisan db:seed`. Para forzar modo manual en un centro clínico, el administrador puede guardar en settings del laboratorio: `{"uses_dicom_worklist": false}`.

Qué no cambia

- Usuarios, roles, salas, modalidades DICOM, Orthanc/PACS y visor OHIF (<https://viewer.healthticloud.cl>).

• Da
incluye.

Documentación técnica de instalación: [docs/INSTALACION.md](#) y [docs/GUIA_INSTALACION_LABORATORIO.md](#) (Docker LAN, PHP 8.3).

13. Dictado por voz, visor OHIF y bridge local

El radiólogo puede redactar informes con dictado por voz del navegador (Chrome/Edge) o con pedal SpeechMike HID si está habilitado en su PC.

Dictado por voz en el navegador

1. En Radiólogo o Transcripción, abra el editor de informe.

2. Puls

Visor OHIF (imágenes en la nube)

- Botón «Visor PACS» abre <https://viewer.healthticloud.cl/viewer?StudyInstanceUIDs=...>

• El R

Bridge escáner/visor en recepción

En PCs con escáner documental, el programa ris-local-bridge (Node.js + NAPS2) corre en <http://127.0.0.1:8181>. No es necesario en todas las estaciones; solo donde se digitalicen órdenes.

14. Perfil Secretaria

La secretaria apoya recepción: agenda citas, entrega resultados y puede subir imágenes o informes según el centro. ****No**** edita fichas de paciente en PACS salvo excepción RDOX Osorno.

- Módulos visibles: Agenda y Entrega/Retiro (igual que recepción en muchos centros).

• Subi

15. Sincronización con la nube

En instalaciones multi-sede, el servidor central (nube) concentra catálogos y puede recibir datos desde laboratorios LAN. Solo administradores del sistema o perfiles autorizados ven estas opciones.

Desde un laboratorio (LAN)

- RIS_CLOUD_ROLE=local: el lab opera de forma autónoma y puede enviar entidades pendientes a la nube.

• Requ

En el servidor nube

- RIS_CLOUD_ROLE=cloud: recibe actualizaciones inbound y publica catálogo para pull.

• Los l

El personal de recepción no debe ejecutar sync manual salvo indicación de soporte.

16. Preguntas frecuentes

Problema	Qué hacer
No veo un módulo	Verifique laboratorio en barra superior y roles en Administración.
Login no guarda sesión (LAN)	Soporte: SESSION_SECURE_COOKIE=false en servidor.
Visor vacío	Imágenes aún no en PACS o accession incorrecto; tecnología debe finalizar atención.
Correo no llega al paciente	SMTP del centro o MAIL_MAILER=log en pruebas.
Colores viejos tras actualizar	Ctrl+Shift+R o ventana de incógnito en el navegador.
Otra PC no abre el RIS	Use http://IP-del-servidor (no localhost) y misma red WiFi/LAN.

17. Anexo técnico

Información para soporte TI o regeneración de este manual.

- URL producción RIS: <https://ris.healthticloud.cl> — API en /api (config.js con detección automática).

• Visor